

Fijador Externo Temporal

✓ *Rapido*

✓ *Versatil*

✓ *Listo para usar*

Intuitivo. Listo

Dolphix® - Sistema de Fijación Externa - MR Conditional

Fijación externa temporal de los huesos largos, pelvis y pie



✓ NO NECESITA LLAVE

un implante sin instrumental

✓ TODOS LOS COMPONENTES

están disponibles en kits esterilizado o en envoltorios individuales esterilizados

✓ DIFERENTES CONFIGURACIONES


con 1 solo fijador

✓ TODAS LOS CABEZALES

bloqueados manualmente y comprobadas a simple vista

TORNILLO PARA CONTROL DE DAÑO - TITANIO

con triple diámetro

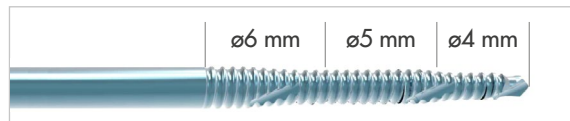

TORNILLO ESTÁNDAR - TITANIO

única rosca: $\varnothing 4$ mm, $\varnothing 5$ mm, $\varnothing 6$ mm; punta biselada



Ejemplo de caso clínico Fractura diafisaria de tibia y fibula

Mujer, 22 años, TIBIA FIBULA IZQ.

Cortesía del Prof. Max Morandi, MD,
FACS, Dept. of Orthopedic Surgery
Louisiana State University Health
Sciences Center, Shreveport, LA



Información de seguridad en RM

Un paciente con este dispositivo puede someterse a exploraciones sin peligro si se cumplen las siguientes condiciones:

- campo magnético estático de 1.5 o 3 Tesla;
- gradiente espacial máximo de 30 T/m;
- máxima tasa de absorción específica promediada para todo el cuerpo de 2 W/kg *

* La información completa de seguridad de RM está archivada en Citieffe

NOTE Con un campo de 1,5 T Dolphix® se puede utilizar sin peligro hasta 60 minutos de exposición, a 3 T escanear con 2 W/Kg debe limitarse a 15 min.